

Protective Cover Disposable Cover

SystemRoMedic™

Manual de usuario – Español



Protective Cover



Disposable Cover

REF

1051	1055
1151	1155
1251	1255
1451	2055
1481	9138
2051	9168
2052	

SWL for protective cover for EasySlide: 300 kg/660 lbs
SWL for protective cover for RollerSlide: See board

Protective Cover Disposable Cover

SystemRoMedic™

Español

Hay disponibles distintas cubiertas protectoras para el EasySlide y el RollerSlide de SystemRoMedic. Protective Cover es una cubierta multiuso fabricada en un material de fricción ultra baja (ULF). Se aconseja utilizar la Disposable Cover, una cubierta de uso único elaborada en plástico, por ejemplo, en atención de emergencia y salas de aislamiento. La cubierta protectora multiuso de RollerSlide es también una cubierta deslizante, ya que permite desplazar libremente la deslizadera.



Inspección operacional

Inspección visual


Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.



Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados. Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto. Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual. Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

Colocación

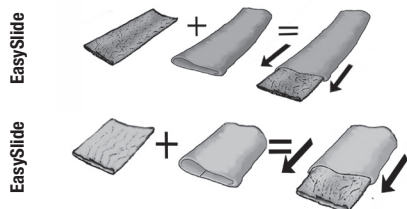

Las Disposable Covers se suministran en cómodos rollos, pudiendo extraerse individualmente.

La Disposable Cover y la Protective Cover se colocan encima del EasySlide o el RollerSlide (ver imágenes).


¡ATENCIÓN! La Disposable Cover no puede someterse a lavado, debiendo desecharse tras su uso.

Cuidado del producto

Consulte la etiqueta del producto.



No use detergente/suavizante y evite el secado para una vida útil óptima.

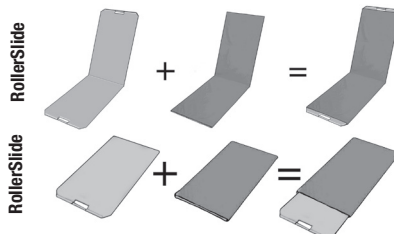

Al utilizar la Disposable Cover en el RollerSlide, recuerde que siempre se requerirá una cubierta deslizante, que es lo que permite desplazar libremente la deslizadera.



Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

Vida útil estimada

Hasta 10 años de uso normal.

Product information

Art. no.	Product name	Accessorie to	Unit
1051	ProtectiveCover	EasySlide 1030, 1020	1 pce
1151	ProtectiveCover	EasySlide 1130, 1120	1 pce
1251	ProtectiveCover	EasySlide 1220, 1230	1 pce
1451	ProtectiveCover	EasySlide 1420, 1430	1 pce
1481	ProtectiveCover	EasySlide 1470, 1480	1 pce
2051	ProtectiveCover	EasySlide 2010, 2020	1 pce
2052	ProtectiveCover	EasySlide 2011, 2021	1 pce
1055	DisposableCover	EasySlide 1030, 1020	2 x 50 pce
1155	DisposableCover	EasySlide 1130, 1120	2 x 90 pce
1255	DisposableCover	EasySlide 1220, 1230	2 x 85 pce
2055	DisposableCover	EasySlide 2010, 2020	2 x 165 pce
9136	SlidingCover	RollerSlide 9120, 9145, 9148	1 pce
9156	SlidingCover	RollerSlide 9110, 9155, 9158	1 pce
9138	DisposableCover	RollerSlide 9120, 9145, 9148	2 x 50 pce
9168	DisposableCover	RollerSlide 9110, 9155, 9158	2 x 115 pce

Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; www.handicare.com.

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.handicare.com.

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.



MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com