

Dyna-Form® Mercury Advance

El **Dyna-Form® Mercury Advance** es un sistema dinámico de sustitución de colchones combinado con las ventajas de la moderna tecnología de espumación. Está diseñado específicamente para pacientes considerados de **“muy alto riesgo”** de desarrollar úlceras por presión. Este sistema único, que ofrece un alto nivel de comodidad al paciente, puede pasar a ser un colchón dinámico cuando sea necesario desde el punto de vista clínico. Del mismo modo, la función del colchón puede “reducirse” a medida que mejora el estado del paciente.


Estas características lo hacen especialmente ventajoso para su uso en el domicilio del paciente o en un entorno de cuidados paliativos y ayudan a reducir los costes logísticos y de descontaminación. Las ventajas clínicas de un sistema único son igualmente aplicables a las de un entorno hospitalario moderno.

Una mayor capacidad de peso máximo, de hasta 254 kg, permite al producto hacer frente a los retos que plantean los pacientes de mayor peso. Todos los componentes son intercambiables y reemplazables, lo que maximiza la vida útil del producto y reduce el impacto medioambiental. La cubierta exterior, compuesta por un tejido permeable al vapor, multielástico y soldado por alta frecuencia, cumple las políticas de control de infecciones más estrictas.

Tenga en cuenta que este producto también está disponible con umbilical recubierto de PU.


Especificaciones técnicas

Códigos de los productos	MAS12007689
	MAS12007690
	MAS12007691
	MAS12007692
	MAS12004539
	MAS12002987
Dimensiones del producto	190 (L) x 80 (W) x 15cm (H)
	190 (L) x 85 (W) x 15cm (H)
	190 (L) x 90 (W) x 15cm (H)
	200 (L) x 80 (W) x 15cm (H)
	200 (L) x 85 (W) x 15cm (H)
	200 (L) x 90 (W) x 15cm (H)
Categoría de riesgo	Riesgo muy alto
Usuario máximo peso	254kg
Peso del producto	Colchón de 13,3 kg / unidad motriz de 1,7 kg
Foam Density & Nominal Hardness	Inserto de espuma - 38-40kg/m³
	Dureza nominal - 120N
	Espuma CME azul - 38-40kg/m³
	Dureza nominal - 200N
Duración del ciclo	10 minutos
Tensión	220-240VAC, 50/60Hz
Consumo de energía	10VA

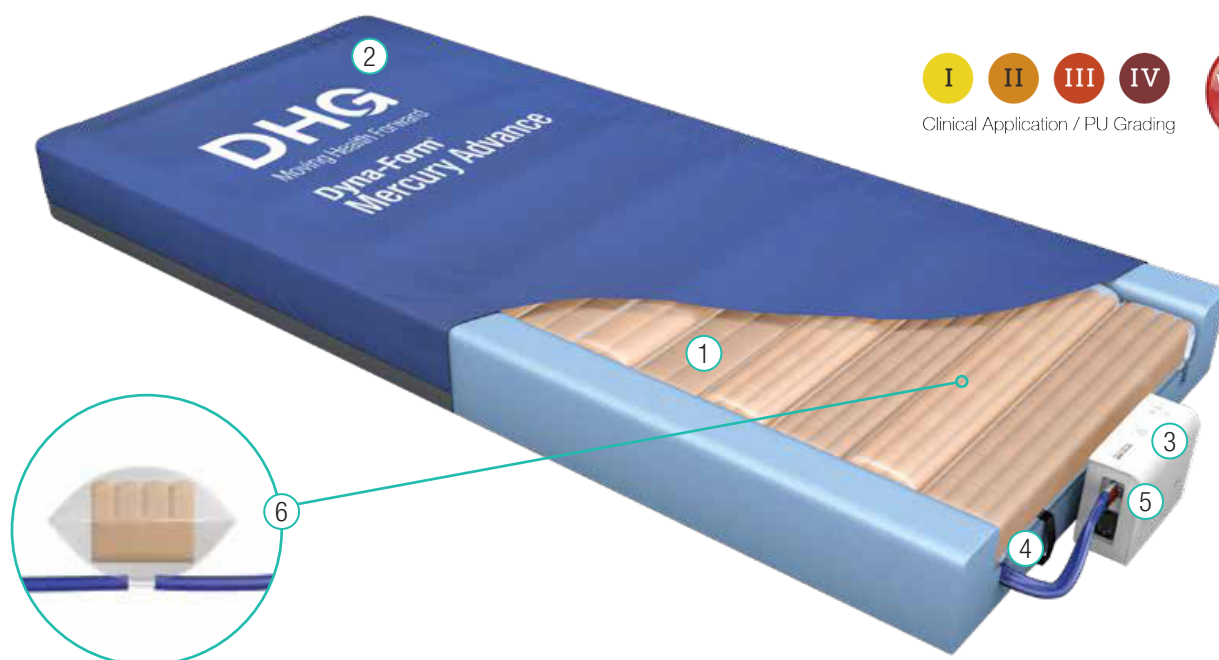

I II III IV
Clinical Application / PU Grading

Very High
Risk

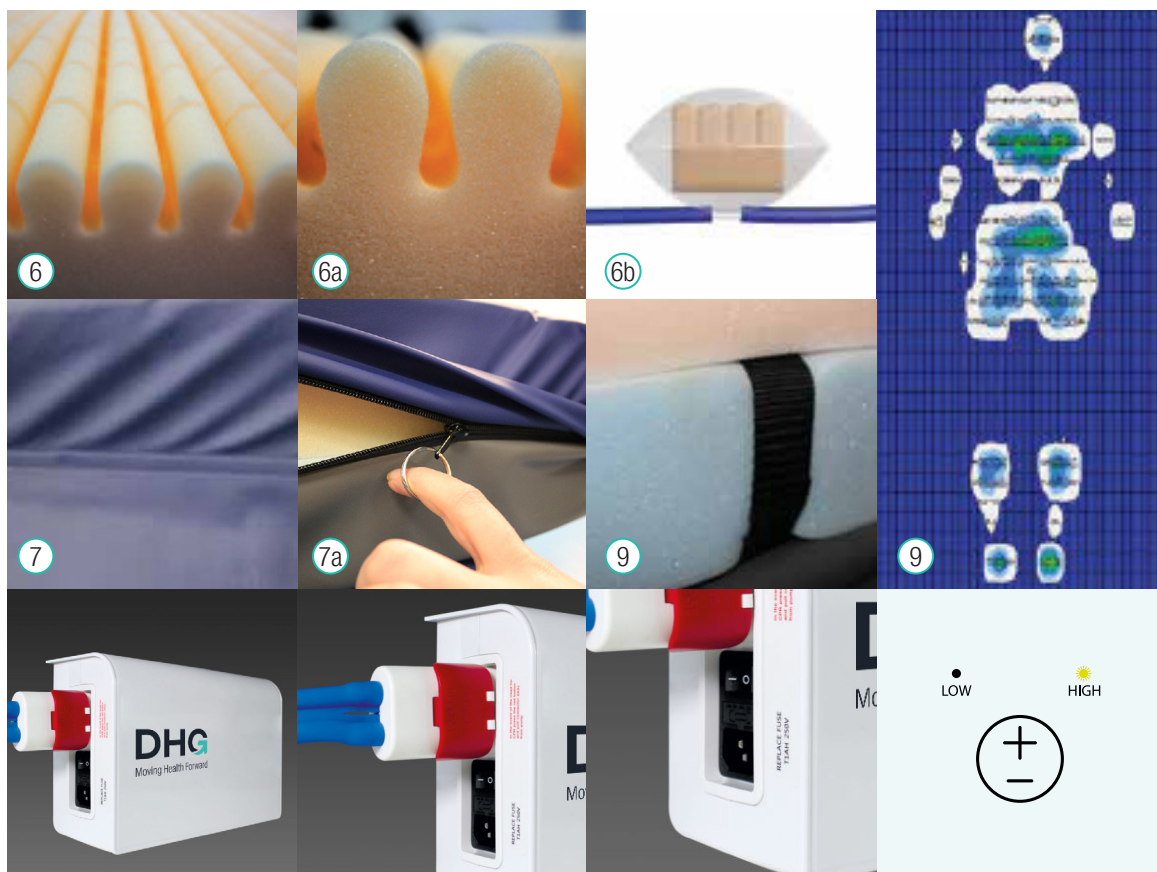

Características

- ① Tecnología combinada de espuma y colchón dinámico
- ② Sección de cabeza fija
Modo estático
- ③ Modo de selección de presión
Colchón 2 en 1
Colchón de espuma clínicamente probado
- ④ Correas de sujeción opcionales
Unidad de alimentación fácil de usar
Sistema de aviso acústico-visual
- ⑤ Válvula de conector RCP de fácil desinflado

Beneficios

- Ofrece la posibilidad de “intensificar” y “reducir” los cuidados en función de las necesidades clínicas de los usuarios
- Mantener la estabilidad de la cabeza y los hombros
- Para transferencias rápidas o procedimientos de limpieza
- Proporciona la máxima comodidad al paciente, sin afectar a los procedimientos asistenciales
- Minimiza los costes de logística, descontaminación y reparación
- Más de 25 estudios clínicos sobre Mercury Advance
- Garantiza un uso seguro tanto para el paciente como para el cuidador
- Diseñado pensando en el entorno de los cuidados comunitarios
- Un LED intermitente y un sistema de aviso acústico alertan al cuidador/persona de la baja presión de las células o de un fallo del sistema
- Permite un desinflado rápido en 10 segundos

- ⑥ Tecnología de células de espuma en un ciclo de funcionamiento
6a: Primer plano de las formaciones de espuma CME dentro de la célula
6b: Posibilidad de cambiar cada celda individual, lo que ofrece excelentes oportunidades de gestión de costes
- ⑦ Diseño de soldadura mínima con tapa protectora con cremallera, que impide la entrada o el alojamiento de flora cutánea y otras bacterias
7a: Diseño de cremallera “Ring Pull” para ayudar a manos artríticas u otras discapacidades
- ⑧ Los mapas de presión más recientes, que muestran el sistema en mitad del ciclo, demuestran la excepcional capacidad de redistribución de la presión
- ⑨ Estructura celular, fijada al núcleo del colchón de espuma, que evita movimientos no deseados
- ⑩ La unidad de alimentación de diseño moderno se completa con multitud de funciones, entre las que se incluyen: Modo de selección de confort, funciones de modo RCP/estático, LED de presión baja/alta y funciones de aviso acústico con función de silencio, interruptor de encendido/apagado luminoso, función de bloqueo de la unidad de bombeo.